



Wir geben Ihren Patienten Halt mit CEKA-REVAX



Sehr geehrter Kunde,

mit dieser Kunden-Info wenden wir uns zum letzten Mal in diesem Jahr an Sie. Wir alle wissen, dass 2005 ein Jahr des Superlativs war: So schlecht lief das Geschäft noch nie zuvor! Wenn es denn jetzt also langsam zur Neige geht, werden wir erleichtert aufatmen und voller Hoffnung auf das neue Jahr und unsere neue Regierung blicken. Setzen wir also auf Neuanfang.

Der Zukunftstechnologie **Implantat-Technik** soll denn auch unser letzter Beitrag gelten. Im Bewusstsein der Bevölkerung nimmt diese Thematik einen immer höheren Stellenwert ein und gibt Raum für leichtere Überzeugungsarbeit. Schließlich ist es inzwischen möglich, wesentlich komplizierter gelagerte Fälle durch das Setzen von Implantatstrukturen zu lösen.

Ferner möchten wir Ihnen mit einem kleinen preislichen „Bonbon“ in diesen trüben Tagen eine leichte Stimmungsaufhellung verschaffen. Entnehmen Sie dieser Seite nähere Informationen dazu.

Zum Schluß noch eine kleine Bitte: Wie gefallen Ihnen unsere sporadisch erscheinenden Infos? Für einen kurzen Hinweis oder eine Anregung wären wir Ihnen dankbar.

Bleiben Sie uns gewogen

Ihr **CEKA-VERTRIEB-Deutschland**

CEKA-SOL


Das einzigartige Lotprogramm mit integriertem Flussmittel

CEKA SOL ist ein hochwertiges Lot zum Löten von Kronen, Brücken und Attachments. Einzigartig ist es durch sein integriertes Anti-Oxyd-Flussmittel. Aufgrund seines optimalen Fließvermögens kann es problemlos, schnell und sparsam verarbeitet werden. Mit CEKA-SOL können alle Dentallegierungen - ob Edelmetall oder Nichtedelmetall - verbunden werden. Überzeugen Sie sich selbst von seinen besonderen Fähigkeiten.




Funktion, Ästhetik und Stabilität: Das sind die wichtigsten Faktoren, die den Ausschlag zu einer implantatgetragenen Totalprothese geben. Patienten stellen hohe Ansprüche an Ästhetik und Komfort und erwarten, dass sich Ihre „Dritten“ so wenig wie möglich von ihren natürlichen Zähnen unterscheiden.


Im Laufe der Jahre haben sich Implantatkonstruktionen zu den tragenden Säulen der Zahnmedizin entwickelt. Kontinuierlich optimierte und ausgereifte Implantationsmethoden erlauben es inzwischen, selbst in schwierigen Mundsituationen Implantate zu setzen.

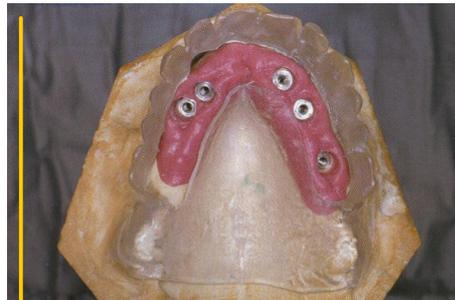


Die Diskrepanz zwischen Implantat- und Zahnposition wird durch eine herausnehmbare Prothese optimal gelöst.

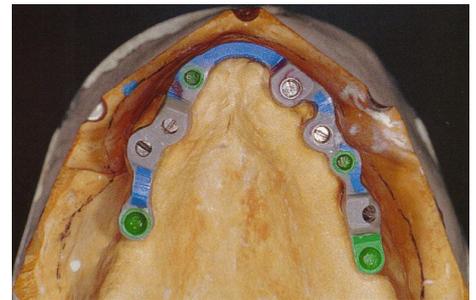

Um die auftretenden Abzugskräfte zu neutralisieren, werden die Halteelemente gleichmäßig über den Steg verteilt.

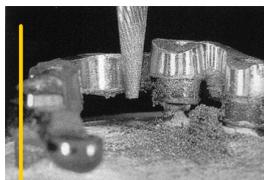

Die Seitenflächen des Steges werden mit 6° konisch nachgefräst.

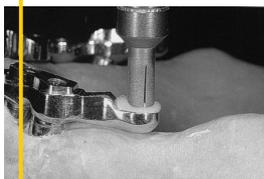

Die Präzisionsteile aus Titan werden in den Steg eingeklebt.

Wenn es kompliziert wird: am besten ein bewährtes Halteelement

Gerade in kritischen Mundsituationen bietet eine Symbiose aus Implantaten und einem bewährten Halteelement die optimale Lösung. REVAX von CEKA lässt sich völlig unsichtbar in die Prothese einarbeiten und kann nun seine entscheidende Funktion übernehmen: dort für Halt zu sorgen, wo er auch wirklich benötigt wird. Im Falle ungünstiger statischer Positionen verhindert es eine unerwünschte Hebelwirkung zwischen Implantat und Inzisalkante der Zähne. Eine zu große Diskrepanz der Implantatposition und der ursprünglichen Stellung der Zähne wird durch das Attachment ausgeglichen. Besonders bei reduzierter Implantatzahl begünstigt die Resilienz dieses Systems eine wünschenswert lange Lebensdauer der prothetischen Konstruktion.

2 Größen: REVAX MACRO & STANDARD

Aufgrund seiner Simplizität und Flexibilität kann es problemlos in den verschiedensten Situationen eingesetzt werden und – je nach Platzangebot - auf zwei verschiedene Attachmentgrößen zurückgegriffen werden.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Implantatlabor zur Verfügung.

Wählen Sie Hannover: 0511 / 8 07 00 41



Mit den Doublierhilfssteilen schafft man Retentionsräume im Modellguß zum Einkleben der Gewindekappen.

© CEKA-VERTRIEB Deutschland 2005 . Alle Rechte vorbehalten.